


cardiofax S

Elektrokardiograph ECG-1250




Druckbeispiele

12-Kanal-EKG, 6 Kurven, Analyse-Ergebnisse und typische Kurven

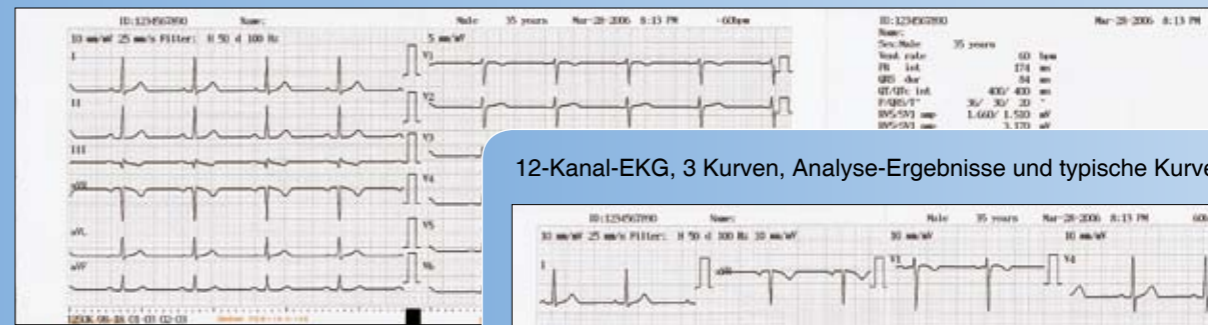

12-Kanal-EKG, 3 Kurven, Analyse-Ergebnisse und typische Kurven

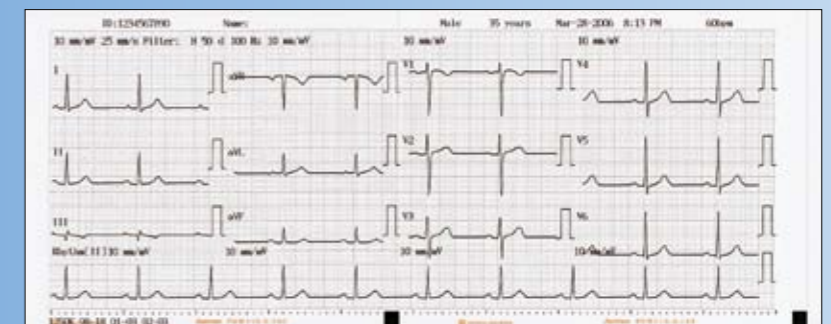


Automatische Verlängerung der Aufzeichnung bei Arrhythmie-Erkennung



OPTIONEN



· Gerätewagen, KD-104E
Kabelarm, KH-801E
* Zubehör-Kit ist separat erhältlich

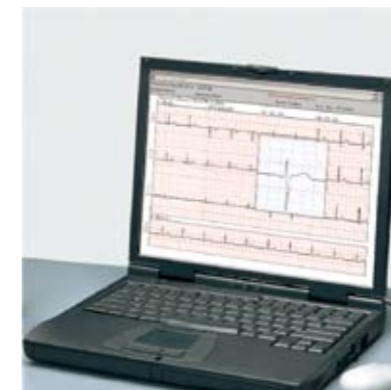

· Daten-Management-Software, NKD-DMS
(Ermöglicht die Wiedergabe der EKG-Daten auf einem PC.)

Technische Änderungen vorbehalten.

NIHON KOHDEN

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstraße 10, D-61191 Rosbach
Telefon: +49 (0) 60 03 / 8 27-0, Telefax: +49 (0) 60 03 / 8 27-5 99
Internet: www.nihonkohden.de, www.nihonkohden.com
E-Mail: info@nke.de

Fighting Disease with Electronics
NIHON KOHDEN

Bestell-Nr.: ECG-1250 (09/06)

Printed in Germany



Gut lesbare farbige LCD-Anzeige

Die helle, hintergrundbeleuchtete Farb-LCD-Anzeige erleichtert das Ablesen der Daten.

Alphanumerische Tastatur zur Dateneingabe

Zur Identifizierung der Patienten und leichteren Speicherung der Daten können Sie den Patientennamen sowie eine numerische Patientenummer mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur eingeben.

Datenübertragung zur Befundung

Mit einer SD-Karte können die EKG-Daten an einen PC übertragen werden und dort mit Hilfe der optionalen Daten-Management-Software befundet werden.

Papiersparende Aufzeichnung

Zur Kostenreduzierung zeichnet der interne Thermokammschreiber 6 EKG-Kurven auf 110 mm Papierbreite auf. Die Kurven und Analyse-Ergebnisse können zur papierlosen Befundung auf einen PC übertragen werden (optionale Daten-Management-Software erforderlich).

Erweiterte Aufzeichnung

Sobald eine Arrhythmie erkannt wird, kann die Aufzeichnung der Rhythmus-Ableitung oder der Ableitungsgruppe automatisch verlängert werden. Die Aufzeichnung der ersten Ableitungsgruppe kann ebenso manuell verlängert werden.

Hervorragende 12-Kanal-EKG Analyse

Cardiofax S verfügt über das neueste Nihon Kohden Interpretationsprogramm, das ECAPS12C Analyseprogramm. Es ermöglicht eine simultane 12-Kanal EKG-Ableitung von bis zu 24 Sekunden und eine Analyse mit nahezu 200 Befunden sowie 5 Befundkategorien.

Netz- und Batteriebetrieb

Eine vollständig geladene, neue Batterie ermöglicht die Untersuchung und Aufzeichnung von bis zu 40 Patienten.

Simultane Anzeige des 12-Kanal-EKGs

Sie können das 12-Kanal-EKG simultan wiedergeben. Dies ermöglicht bessere Aufzeichnungen und effizientere Untersuchungen, da Sie die Kurven vor der Aufzeichnung überprüfen können und somit Fehlausdrucke und unbrauchbare Untersuchungsergebnisse vermeiden.

Kompakt

Das EKG ist kompakt, leicht und einfach zu tragen. Die Größe entspricht dem Format A4, und es hat einschließlich Batterie ein Gewicht von nur 2,5 kg.